


## DetectPro Medical Call Center WC-MCC02


Operation Manual

Medical Call Center je asistenčné zdravotnícke zariadenie na spustenie alarmu po prijatí výstražných signálov z rôznych zariadení Warmcare a súčasné odoslanie výstražných signálov do spárovanej jednotky CMU Touch. Zapne sa po pripojení k zdroju napájania alebo batériám bez vypínača. Pre správnu manipuláciu sa zariadenie musí spravovať podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.

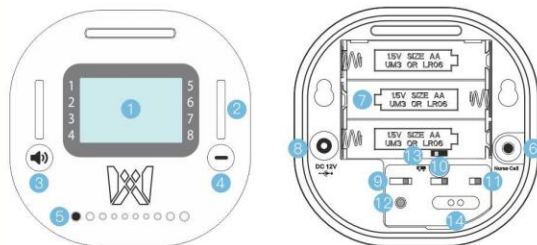


1. LCD Display
2. Svetelná indikácia
3. Nastavenie hlasitosti
4. Pause/ Reset
5. Externý reset  
Prijímač signálu
6. Port na prenos signálu
7. Priestor na batérie
8. (Battery: AA 1.5V x 3)
9. DC Vstup: 12
10. Tón alarmu  
Oneskorenie alarmu
11. Zapnutie/vypnutie resetovania monitora
12. Párovanie
13. Zapnutie/vypnutie prenosu
14. Programming Port
15. Test (3 + 4)

### Nastavenie hlasitosti

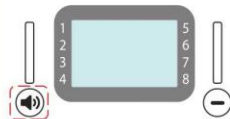

- a. 3 Úroveň hlasitosti: Vysoká/ Stredná/ Nízka
- b. Dlhé stlačenie (3) tlačidlo pre vstup do ticha sa na LCD displeji zobrazí ikona informácia o stlmení alarmu.

### Zobrazenie na LCD displeji

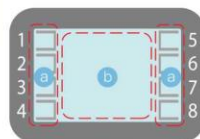

- a. Status vysielča 1 8
- b. Všeobecné, Stav napájania/batérie a výstrahy

## Indikácia stavu

### Všeobecný stav (b)

Welcome	Pripojený napájací zdroj
1 Pairing	Párovanie príslušných zariadení
Reset All	Resetovanie všetkých alarmov
HOLD 9m59	Režim pozastavenia alarmu
-- X --	Monitor odpojený s volaním sestry
1	Vysieláč odpojený
	Režim stlmenia

### Stav pohotovosti (b)

	Tlačidlo hovoru
	Senzorová podložka
	Senzorová podložka

\* Zobrazenie sluchy, ak je viac ako 1 upozornenie.

### Stav napájania/batérie (b)


	Odpojený napájací zdroj
	Nízky stav batérie
	>30 % Battery**
	>60 % Battery**
	>90 % Battery**

\*\* Normálny stav batérie zobrazený v hornej časti v pravom rohu obrazovky.

### Stav vysielča (a)

	Párovanie
	In-Použitie (pre senzorovú podložku)
	Počas alarmu
	Vybitá batéria (spárovaný vysieláč)
	Slabá batéria (používaná podložka senzora)
	Vybitá batéria (počas alarmu)

## Indikácia straty signálu

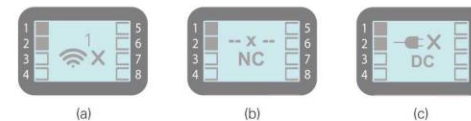

Pri zistení nižšie uvedených podmienok monitor vydá výstrahu "pípnutie" a rozsvieti červenú indikáciu:


- (a) Odpojené od vysielča
- (b) Odpojenie od siete s volaním sestry
- (c) Odpojené od zdroja napájania



## ! Upozornenie:


- Nevykonávajte žiadnu údržbu. Za akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobenú nesprávnym používaním používateľmi alebo údržbou po záručnej dobe bude účtovaný poplatok za údržbu.
- V prípade potreby utrite neagresívnym dezinfekčným prostriedkom na čistenie. Monitor ani súvisiace zariadenia neponárajte do žiadnej tekutiny.
- Nevystavujte monitor a súvisiace zariadenia extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Zabráňte akémukoľvek nárazu do monitora (napr. pádu monitora na zem). V prípade akýchkoľvek zmien v návode na obsluhu sa nebude podávať žiadne ďalšie oznámenie.

## Zapnutie/vypnutie funkcie resetovania monitora

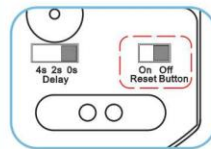

- On:** Zapnutá funkcia resetovania monitora
- Off:** Funkcia resetovania monitora je vypnutá.  
Na resetovanie alarmu sa používa externý resetovací kľúč


## Low Battery

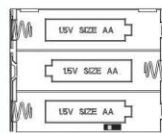

Zobrazenie ikona na LCD displeji s nepretržitým froszvietením červenej kontrolky a výstrahy "Beep" signalizujú ú slabú batériu monitora.

Odskrutkovaním otvorte puzdro na výmenu 3 kusov AA 1.5V batérie alebo zabezpečenie stabilného DC pripojenia k zdroju napájania.

## Zariadenie spárovanie

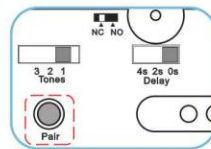

- Stlač **Pair** kým monitor nevydá zvukový signál, čím vstúpi do režimu párovania;
- Stlač **Pair** tlačidlom vyberte príslušné ID zariadenia 1–8;
- Spustíte párovanie zariadenia Warmcare s monitorom;
- Monitor dvakrát vydá zvuk "pípnutia", ktorý signalizuje úspešné spárovanie, ikona sa zobrazí na príslušnej pozícii na LCD displeji.

## Vymazanie spárovaných zariadení

Vyberte príslušné zariadenie, stlačte **Pair** pokiaľ sa ikona zmizne z príslušnej pozície na obrazovke.


## Ukončenie režimu párovania

Stlač tlačidlo na odchod alebo automatické ukončenie po 10 s, ak nie je k dispozícii žiadny ďalší príkaz prijatý monitorom.

\* Predchádzajúce párovanie by sa pri opakovanom párovaní nahradilo novým párovaním.

\* Ak bolo zariadenie spárované s monitorom, na displeji LCD sa zobrazí pôvodné spárované ID umiestnenia.

## Testovanie zariadenia

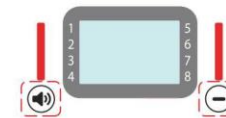



pri absencii prichádzajúceho alarmu stlačte tlačidlo a tlačidlo súčasne, bliká červená svetelná indikácia so zvukom "pípnutia" signalizuje normálnu prevádzku monitora.

## Režim Pauza



- Vstup do režimu pozastavenia  
Stlač kým monitor raz nevydá zvuk "Beep" a na LCD displeji sa nezobrazí "HOLD".
- Ukončenie režimu pozastavenia
- Stlač alebo automatické ukončenie po 10 minút, ak monitor nedostane ďalší príkaz.

## Resetovanie upozornení

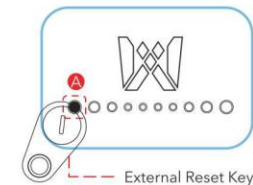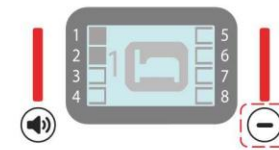

- Resetovanie aktuálneho upozornenia,
  - press na monitore raz vynulovať upozornenia pre rôzne zariadenia Warmcare zariadenia; alebo
  - upozornenia sa vynulujú po opätovnom vyvinutí tlaku na podložku senzora..
- Obnovenie všetkých upozornení
- stlač a podrž tlačidlo, alebo reset
  - nasmerujte externý resetovací kľúč na prijímač externého resetovacieho signálu (A)

\* V prípade rohože floor nedochádza k resetovaniu výstrah pri opätovnom použití tlaku na hornej strane.